



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» для выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений (промотор pSsuAra, ген pat, терминатор tE9, конструкция ctp2-ср4ерsps) в кормах, пищевой продукции, растительном сырье и посевном материале методом полимеразной цепной (ПЦР) реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени

ТУ 21.10.60-387-51062356-2022

Для диагностики *in vitro*

Содержание

Список сокращений	3
1. Назначение	4
2. Характеристика набора	4
2.1 Принцип действия.....	4
2.2 Состав набора	4
3. Аналитические характеристики.....	6
4. Меры предосторожности.....	6
5. Материалы и оборудование	6
6. Отбор материала для исследования, транспортировка и хранение проб	7
7. Проведение анализа	8
7.1. Экстракция (выделение) НК из исследуемых проб	8
7.2. Подготовка образцов к проведению ПЦР	9
7.3 Проведение реакции ПЦР РВ с флуоресцентной детекцией.	9
8. Интерпретация результатов анализа	10
9. Условия транспортирования	11
10. Условия хранения	12
Приложение 1. Порядок работы на приборах Rotor-Gene 3000/6000 (Corbett Research, Австралия) и Rotor-Gene Q (QIAGEN, Германия).....	12
Приложение 2. Порядок работы на приборе ДТ-96 (ДНК-технология, Россия).....	18
Приложение 3. Порядок работы на приборе CFX96 (Bio-Rad, США)	20
Приложение 4. Лист вносимых изменений	23

Список сокращений

ВКО	внутренний контрольный образец
ВК-	отрицательный контроль выделения
К-	отрицательный контроль
К+	положительный контроль
ОКО	отрицательный контрольный образец
ПКО	положительный контрольный образец
ПЦР	полимеразная цепная реакция
ДНК	дезоксирибонуклеиновая кислота
НК	нуклеиновая кислота

1. Назначение

Набор предназначен для выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений (промотор *pSsuAra*, ген *pat*, терминатор *tE9*, конструкция *ctp2-cr4epsps*) в кормах, пищевых продуктах и продуктах питания, растительном сырье и посевном материале методом амплификации ДНК с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.

2. Характеристика набора

2.1 Принцип действия

Набор реагентов позволяет специфически амплифицировать фрагменты промотора *pSsuAra* гена малой субъединицы рибулозобифосфат-карбоксилазы из *Arabidopsis thaliana*; гена *pat* фосфинотрицин N-ацетилтрансферазы от *Streptomyces viridochromogenes*; терминатора *tE9* малой субъединицы рибулозобифосфат-карбоксилазы *Pisum sativum*; конструкции *ctp2-cr4epsps* (соединение хлоропласт-транзитного пептида (СТР2) из *Arabidopsis thaliana* и гена *epsps* из штамма *A. tumefaciens* CP4 (*epsps*)). Детекция продуктов амплификации осуществляется в режиме реального времени с использованием принципа выщепления 5' концевой метки.

2.2 Состав набора

Набор состоит из комплекта реагентов для проведения мультиплексной ПЦР РВ (Комплект №1) и контрольных образцов (Комплект №2).

Набор выпускается в двух вариантах:

- 1) Для анализа 55 образцов (включая контрольные образцы)
- 2) Для анализа 110 образцов (включая контрольные образцы).

Состав набора приведен в Таблицах 1 и 2.

Протокол выходного контроля доступен по запросу.

Таблица 1. Комплект №1 для проведения ПЦР:

№	Состав комплекта	Описание	Объем, мкл		Кол-во
			На 55 реакций	На 110 реакций	
1	Смесь для проведения ПЦР, ПЦР СМЕСЬ СКРИН-2	прозрачная бесцветная жидкость*	275	550	1
2	Буфер для проведения ПЦР, ПЦР БУФЕР СКРИН-2	прозрачная бесцветная жидкость	550	1100	1
3	ДНК Полимераза, TAQ POLYMERASE	прозрачная бесцветная вязкая жидкость	30	60	1
4	Буфер для разведения ДНК, ДНК БУФЕР	прозрачная бесцветная жидкость	500	1000	1

Таблица 2. Комплект №2 контрольные образцы:

№	Состав комплекта	Описание	Объем, мкл		Кол-во
			на 55 реакций	на 110 реакций	
1	Отрицательный контрольный образец, ОКО (ТЕ буфер)	Прозрачная бесцветная жидкость	1500	2000	1
2	Положительный контрольный образец, ПКО СКРИН-2	Прозрачная бесцветная жидкость	100	200	1

В набор не входят реактивы для экстракции нуклеиновых кислот. Для выделения растительной ДНК рекомендуется использование наборов на основе сорбентного метода (например, «ДНК-ПЛАНТ-ФАКТОР», ООО ВЕТ ФАКТОР).

* Возможна легкая опалесценция

3. Аналитические характеристики

Показано отсутствие неспецифических реакций компонентов набора в отношении ДНК млекопитающих, птиц, рыб, а также ДНК нетрансгенных растений.

Предел обнаружения (LOD) — не менее 0,009%.

4. Меры предосторожности

Исследование проводится согласно МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности».

Все лабораторное оборудование, в том числе дозаторы, штативы, лабораторная посуда, а также все рабочие растворы должны быть строго стационарными. Запрещается их перенос из одного помещения в другое.

Работать только в одноразовых перчатках, использовать и менять при каждой операции одноразовые наконечники с аэрозольным барьером.

Одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) сбрасывают в специальный контейнер, содержащий дезинфицирующий раствор (например, натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, 0,2%).

Рабочие поверхности в ПЦР помещениях облучают УФ светом в течение 30 минут до начала и после проведения работ. Также после окончания работ рекомендуется обрабатывать рабочие поверхности дезинфицирующим раствором.

5. Материалы и оборудование

Для зоны выделения ДНК из исследуемого материала:

- Настольный бокс с бактерицидной лампой или стерильный ламинарный шкаф (например, «БАВп-«Ламинар-С»-1,2», «Ламинарные системы», Россия);
- Твердотельный термостат для пробирок типа «Эппендорф» на 1,5 мл с диапазоном температур от 25 до 99°C (например, ТТ-2-«Термит» «НПО ДНК-Технология» Россия);
- Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой для удаления надосадочной жидкости (например, «ОМ-1», г. Ульяновск, Россия).
- Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» до 12 тыс. об/мин (например, «MiniSpin», «Eppendorf», Германия);
- Вортекс (например «ГЭТА-2», «Биоком», Россия);

- Пипетки автоматические одноканальные переменного объема 20-200 и 200-1000 мкл; (например, «Ленпипет», Россия).
- Одноразовые полипропиленовые пробирки на 1,5 мл (например, «Tarsons», Индия);
- Одноразовые наконечники для пипеток переменного объема с аэрозольным барьером до 200 и 1000 мкл в штативах (например, «Tarsons», Индия);
- Перчатки медицинские неопудренные латексные;
- Штативы для микропробирок на 1,5-2 мл (например, «Axygen», США);
- Емкость с дезинфицирующим средством;
- Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой от минус 24 до минус 18 °С;
- Халат лабораторный;
- Набор для выделения ДНК (см. пункт 2.2).

Для зоны проведения ПЦР анализа:

- Амплификатор (например «Rotor-Gene Q», Qiagen; «ДТ-96», ДНК-технология или аналогичный).
- ПЦР-бокс (например, «БАВ-ПЦР-«Ламинар-С», Ламинарные системы, Россия).
- Микроцентрифуга-вортекс (например «ГЭТА-2», «Биоком», Россия);
- Пипетки автоматические одноканальные переменного объема 2- 20, 20-200 мкл и 100-1000 мкл; (например, «Ленпипет», Россия).
- Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с аэрозольным барьером до 20, 200 мкл и до 1000 мкл (например, «Axygen», США).
- Штативы для наконечников (например, «Axygen», США) и микропробирок на 0,2 мл (например, «SSI», США).
- Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой от минус 24 до минус 18 °С;
- Одноразовые полипропиленовые пробирки на 0,2 и 1,5 мл (например, «Axygen», США);
- Штативы для микропробирок на 0,2 и 1,5-2,0 мл (например, «SSI», США);
- Перчатки медицинские неопудренные латексные;
- Халат лабораторный.

6. Отбор материала для исследования, транспортировка и хранение проб

Материалом для исследования могут служить:

- сырье растительного происхождения;
- корма, соевый шрот;

- посевной материал;
- свежие или высушенные части растений;
- пищевые продукты, содержащие компоненты растительного происхождения;
- биодобавки, содержащие компоненты растительного происхождения

Отбор исследуемых образцов проводят по национальным стандартам, устанавливающим порядок отбора проб для однородных групп сырья, пищевых продуктов и кормов.

От пробы плотной консистенции отбирают на исследование общую пробу весом 10-50 г.

Гранулированную или консервированную продукцию перед исследованием (10-20 г) растирают в ступке до гомогенного состояния. Пробы жидких продуктов отбирают в чистые емкости из стекла или пластика с герметично закрывающимися крышками объемом не более 50 мл.

Лабораторные пробы отбирают на исследование и тестируют в двух повторах. Отбирают лабораторные пробы (20 — 40 мг) в одноразовые микропробирки вместимостью 1,5 мл и направляют на выделения ДНК.

Образцы сырья и продуктов рекомендуется хранить в течение 1 мес (при необходимости повторного анализа) согласно условиям, указанным производителем продукта. Образцы скоропортящихся продуктов рекомендуется хранить в замороженном состоянии (при температуре не выше минус 16 °С) в течение 1 месяца (при необходимости повторного анализа).

Транспортирование образцов осуществляют при температуре, рекомендованной для хранения сырья или пищевого продукта. Длительность транспортирования не должна превышать сроков годности продукта.

7. Проведение анализа

Исследование с помощью набора реагентов « ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» состоит из трех этапов:

- экстракция НК (на этом этапе дополнительно используют реактивы для экстракции, например, набор «ДНК-ПЛАНТ-ФАКТОР», ООО ВЕТ ФАКТОР).
- проведение ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени;
- учет результатов анализа.

7.1. Экстракция (выделение) НК из исследуемых проб

Отобрать необходимое количество одноразовых пробирок объемом 1,5 мл, включая отрицательный контроль выделения.

Внести исследуемые пробы в объеме согласно инструкции к набору для выделения ДНК, в пробирку отрицательного контроля выделения вместо исследуемой пробы внести **ОКО (пробирку обозначить как ВК-)**.

Выделять ДНК из анализируемых и контрольных образцов согласно инструкции производителя набора для выделения растительной ДНК.

Выделенную ДНК можно хранить в течение одной недели при температуре от 2°C до 8°C или в течение года при температуре не выше минус 16°C.

7.2. Подготовка образцов к проведению ПЦР

Общий объем реакционной смеси – 25 мкл, объем ДНК-пробы – 10 мкл.

Успешное прохождение реакции контролируют использованием **ПКО СКРИН-2** и ДНК буфера.

Примечание. Допускается размораживание реагентов из набора перед работой при температуре не выше 40°C (с использованием термостата). **Прогревание пробирки TAQ POLYMERASE категорически запрещено.**

В отдельной пробирке смешать компоненты набора из расчета на каждую реакцию ПЦР:

5 мкл ПЦР СМЕСЬ СКРИН-2;

10 мкл ПЦР БУФЕР СКРИН-2;

0,5 мкл TAQ POLYMERASE.

Перемешать смесь на вортексе и сбросить капли кратковременным центрифугированием.

Отобрать необходимое количество пробирок для амплификации ДНК исследуемых и контрольных проб. Внести по 15 мкл приготовленной реакционной смеси.

Используя наконечники с фильтром в подготовленные пробирки внести:

а) в пробирку отрицательного контроля ПЦР (К-) 10 мкл ДНК буфера;

б) в ряд пробирок для исследуемых проб - в каждую внести по 10 мкл ДНК соответствующей пробы, полученной по п.7.1 (включая пробу ВК-);

в) в пробирку положительный контроль ПЦР (К+) 10 мкл **ПКО СКРИН-2.**

Примечание. При использовании для работы амплификаторов с считыванием через крышку (например, ДТ-96) **запрещается наносить маркировку на крышку пробирок!**

7.3. Проведение реакции ПЦР РВ с флуоресцентной детекцией.

Параметры температурно-временного режима амплификации на приборах «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» и CFX96 указаны в Приложениях 1, 2 и 3 Инструкции соответственно.

Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в ячейки амплификатора. Запрограммировать прибор согласно инструкции производителя и в соответствии с Приложениями 1, 2 и 3 Инструкции.

В случае использования амплификаторов других моделей рекомендуется консультация со специалистом компании «ВЕТ ФАКТОР».

После завершения программы амплификации отработанные пробирки утилизируют в соответствии с МУ 1.3. 2569 -09.

8. Интерпретация результатов анализа

Полученные данные – кривые накопления флуоресцентного сигнала анализируются с помощью программного обеспечения используемого прибора для проведения ПЦР в режиме «реального времени» в соответствии с инструкцией производителя к прибору и в соответствии с приложениями 1, 2 и 3 к Инструкции.

Учет результатов ПЦР-анализа проводится по наличию или отсутствию пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией (что соответствует наличию или отсутствию значения порогового цикла «Ct» для исследуемого образца).

Результат считается достоверным в случае корректного прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и экстракции ДНК в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Оценка результатов анализа.

Проба	Канал детекции				Результат
	FAM/Green	JOE(HEX)/Yellow	ROX/Orange	Cy5/Red	
	<i>tE9</i>	<i>pat</i>	<i>pSsuAra</i>	<i>ctp2-cp4esps</i>	
ПКО (К+)	До 31	До 31	До 31	до 31	Реакции положительного и внутреннего контролей прошли успешно
ДНК буфер (К-)	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Реакция прошла успешно
	Любое значение	Любое значение	Любое значение	Любое значение	Специфическая контаминация! ТРЕБУЕТСЯ повторная постановка! Рекомендуется поставить смывы
ОКО (ВК-)	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Экстракция прошла успешно
	Любое значение	Любое значение	Любое значение	Любое значение	Специфическая контаминация! ТРЕБУЕТСЯ повторная экстракция! Рекомендуется поставить смывы
Образцы	Любое значение от 1 до 38	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Результат анализа положительный. Терминатор tE9 обнаружен

Проба	Канал детекции				Результат
	FAM/Green	JOE(HEX)/Yellow	ROX/Orange	Cy5/Red	
	<i>tE9</i>	<i>pat</i>	<i>pSsuAra</i>	<i>ctp2-cp4esps</i>	
	Сигнал отсутствует	Любое значение от 1 до 38	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Результат анализа положительный. Ген <i>pat</i> обнаружен
	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Любое значение от 1 до 38	Сигнал отсутствует	Результат анализа положительный. Промотор <i>pSsuAra</i> обнаружен
	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Любое значение от 1 до 38	Результат анализа положительный. Маркер <i>ctp2-cp4esps</i> обнаружен
	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Сигнал отсутствует	Результат отрицательный. ДНК маркеров генетически модифицированных растений не обнаружена

Наличие корректного сигнала по каналам свидетельствует о присутствии ДНК маркеров в исследуемом образце:

1. Канал FAM/Green – маркер *tE9* терминатор.
2. Канал JOE(HEX)/Yellow – маркер ген *pat*;
3. Канал ROX/Orange – маркер *pSsuAra* промотор;
4. Канал Cy5/Red – маркер *ctp2-cp4esps*.

Если для исследуемого образца по заданному каналу детекции значение *St* определяется позднее 38 цикла при корректном прохождении положительных и отрицательных контролей – он считается спорным и исследуется повторно с этапа выделения НК. Если при повторной постановке наблюдается схожий результат ($St \leq 38$), считают, что данный **ДНК маркер ГМ растений не обнаружен**.

ВНИМАНИЕ! При появлении любого значения *St* для отрицательного контроля этапа ПЦР К- (на любом из каналов) рекомендуется исследование смывов с поверхностей в лаборатории для исключения риска внутрилабораторной контаминации. Смывы с лабораторных поверхностей и оборудования используют в качестве матрицы для ПЦР (вносят в реакцию вместо исследуемых проб в количестве 10 мкл) – то есть смывы исследуют без экстракции. Появление любого значения *St* на любом из каналов свидетельствует о внутрилабораторной контаминации.

9. Условия транспортирования

Набор «ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С не более 5 суток.

10. Условия хранения

Длительное хранение комплектов набора «ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» осуществляют при температуре от минус 18 до минус 20°C.

Перед началом работы с набором компоненты набора следует разукomплектовать и хранить в соответствии со следующими требованиями:

Комплект №1 (см. Табл. 1) при температуре от минус 18 до минус 20°C;

Комплект №2 (см. Табл. 2) при температуре от 2 до 8°C.

11. Срок годности

Срок годности реагентов «ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» 12 месяцев. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Приложение 1. Порядок работы на приборах Rotor-Gene 3000/6000 (Corbett Research, Австралия) и Rotor-Gene Q (QIAGEN, Германия)


В случае первого использования ПЦР-набора на приборе необходимо создать протокол с названием «ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» (при дальнейшей работе используют созданный шаблон).

При работе с прибором Rotor-Gene 3000 используют программу Rotor-Gene версии 6 или выше, с приборами Rotor-Gene6000и Rotor-GeneQ– используют программу Rotor-Gene 6000 версии 1.7 (build67) или выше.


Термины, соответствующие разным версиям программного обеспечения, расположены по тексту в следующем порядке: для прибора «Rotor-Gene» 3000 / для англоязычной версии программы «Rotor-Gene» 6000 (Q)/ для русскоязычной версии программы «Rotor-Gene» 6000 (Q).

1. Открыть программу «Rotor Gene Q».


2. Выбрать в основном меню программы значок «New»/«Новый. В открывшемся окне выбрать «Пустой шаблон», нажать кнопку «New»/«Новый.

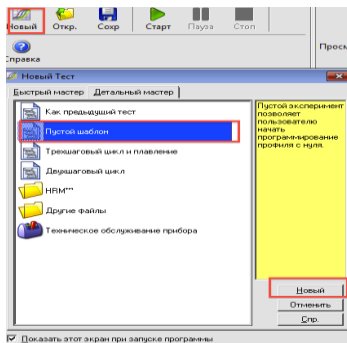

3. Выбрать тип ротора. Например, «36-Well Rotor»/«36-луночный ротор» при использовании ротора на 36 образцов. Поставить отметку в окошке рядом с надписью «No Domed 0.2 ml Tubes»/«Locking ring attached»/«Кольцо закреплено». Нажать кнопку «Next»/«Далее».

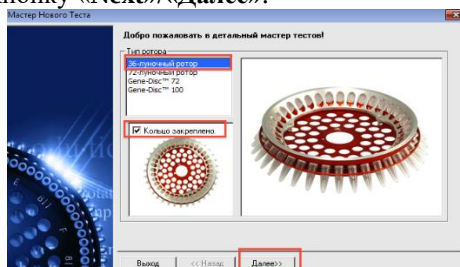

4. Указать оператора, объем реакционной смеси «Reaction volume»/Объем реакции – 25 мкл. Для Rotor-Gene 6000 должно быть отмечено окошко «15 ☐ oil layer volume»/«15 μ L объем масла/воска». Нажать кнопку «Next»/«Далее».

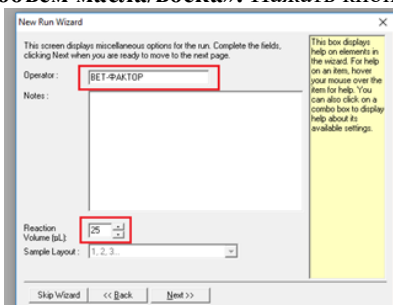


5. В верхней части окна нажать кнопку «Edit profile»/«Редактор профиля». В появившемся окне в соответствии с инструкцией к прибору задать программу амплификации с параметрами, указанными в таблице 4. Нажать клавишу «OK».


Таблица 4 Температурно-временной режим амплификации для прибора Rotor-Gene

№	Температурно-временной режим	Число циклов
1	95°C – 5 мин	1
2	95°C – 20 сек	45
	58°C – 30 сек детекция FAM/Green, JOE/Yellow, ROX/Orange, Cy5/Red	
	72°C – 30 сек	


Для этого требуется проделать следующие шаги:
-Нажать клавишу «Insert after»/«Вставить после» и выбрать «New hold at temperature»/«Новое удержание температуры», установить температуру 95°C и время 5 мин в соответствии с пунктом 1 таблицы 4;
-Нажать клавишу «Insert after»/«Вставить после» и выбрать «New cycling»/«Новое циклирование», установить параметры циклирования в соответствии с пунктом 2 таблицы 4.

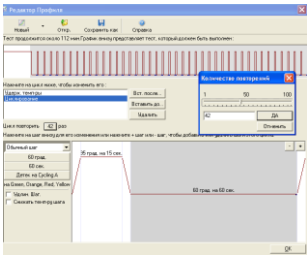


6. В нижней части окна мастера тестов нажать кнопку «Calibrate/Gain Optimisation...»/«Опт.уровня сигн.». В открывшемся окне нажать кнопку «Опт.детек-мых». Для всех каналов указать нужный диапазон стартового сигнала: **Min Reading /минимальный сигнал** - 5, **Max Reading /максимальный сигнал** — 10. В графе «Позиция Пробирки» указать номер пробирки, по которой будет автоматически выбран параметр «усиления сигнала», по умолчанию это 1-я пробирка в роторе. Поставить галочкой строку Perform Calibration Before 1st Acquisition «Выполнить оптимизацию при 1-м шаге детекции». Закрыть окно «Авто-оптимизация уровня сигнала». Нажать кнопку «Next»/«Далее».

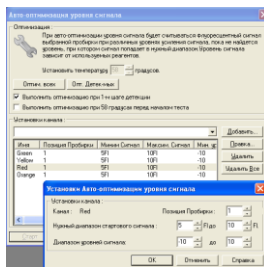

7. Запустить амплификацию кнопкой «Start run»/«Старт». Дать название эксперименту и сохранить его на диске.

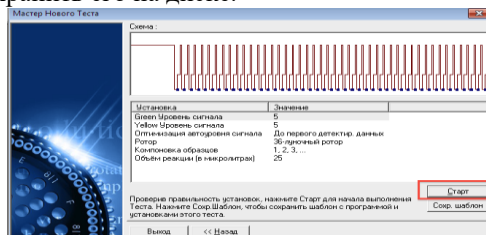


8. После запуска программы необходимо запрограммировать положение пробирок в роторе. Все пробы и контроли обозначить в меню Тип как Unknown «Образец».

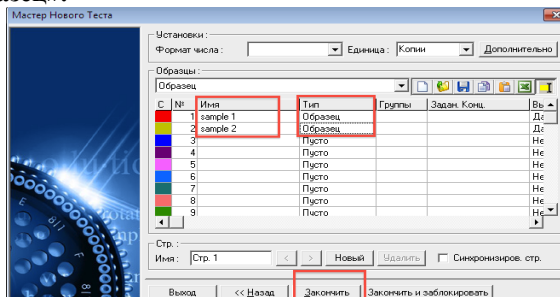

9. После завершения термоциклирования сохранить файл с результатами исследования.


Анализ результатов амплификации для канала FAM/Green (маркер tE9)

10. Нажать в меню кнопку «Analysis»/«Анализ», выбрать режим анализа «Quantitation»/«Количественный», нажать кнопку «Cycling A. FAM»/«Cycling A. Green», далее «Show»/«Показать».

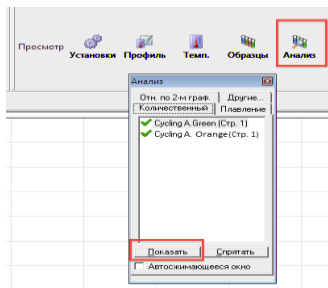


11. Выбрать линейную шкалу графического изображения результатов, нажав кнопку **Linear scale/Линейная шкала** в нижней части окна справа (если эта шкала активна по умолчанию, вместо кнопки **Linear scale/Линейная шкала** видна кнопка **Log scale/Логарифмическая шкала**).

12 В меню основного окна должны быть нажаты кнопки «**Dynamic tube**»/«**Динамич.фон**» и Slope Correct/«**Коррект. уклона**». Установить More settings/Outlier Removal «**Устранение выбросов**» - 15 %.

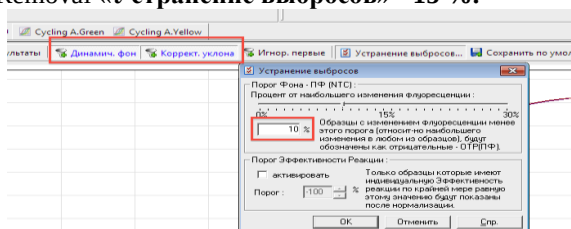

13. В меню «**CE Calculation**». «**Вычисление CE**» выставить **Thresold.Порог = 0,05**.

14. В таблице результатов (окно «**Quant. Results**»/«**Количественные Результаты**») появятся значения Ct.

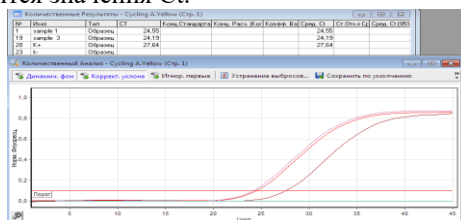

Анализ результатов амплификации для канала JOE(HEX)/Yellow (маркер pat).

15. Нажать в меню кнопку **Analysis/Анализ**, выбрать режим анализа **Quantitation/Количественный**, нажать кнопку **Cycling A. JOE/Cycling A. Yellow** далее нажать **Show/Показать**

16. Выбрать линейную шкалу графического изображения результатов, нажав кнопку **Linear scale/Линейная шкала** в нижней части окна справа (если эта шкала активна по умолчанию, вместо кнопки **Linear scale/Линейная шкала** видна кнопка **Log scale/Логарифмическая шкала**).

17. В меню основного окна должны быть нажаты кнопки «**Dynamic tube**»/«**Динамич.фон**» и **Slope Correct**«**Коррект. уклона**». Установить **More settings/Outlier Removal** «**Устранение выбросов**» - 20%.

18. В меню «**CT Calculation**»/«**Вычисление CT**» выставить **Threshold/Порог** =0,05. В таблице результатов (окно «**Quant. Results**»/«**Количественные Результаты**») появятся значения **Ct**.

Анализ результатов амплификации для канала Rox/Orange (маркер pSsuAra)

19. Нажать в меню кнопку **Analysis/Анализ**, выбрать режим анализа **Quantitation/Количественный**, нажать кнопку **Cycling A. ROX/Cycling A. Orange**, далее нажать **Show/Показать**.

20. Выбрать линейную шкалу графического изображения результатов, нажав кнопку **Linear scale/Линейная шкала** в нижней части окна справа (если эта шкала активна по умолчанию, вместо кнопки **Linear scale/Линейная шкала** видна кнопка **Log scale/Логарифмическая шкала**).

21. В меню основного окна должны быть нажаты кнопки «**Dynamic tube**»/«**Динамич.фон**» и **Slope Correct**«**Коррект. уклона**». Установить **More settings/Outlier Removal** «**Устранение выбросов**» - 15%.

22. В меню «**CT Calculation**»/«**Вычисление CT**» выставить **Threshold/Порог** =0,05.

23. В таблице результатов (окно «**Quant. Results**»/«**Количественные Результаты**») появятся значения **Ct**.

Анализ результатов амплификации для канала Cy5/Red (маркер ctp2-cr4esps).

24. Нажать в меню кнопку **Analysis/Анализ**, выбрать режим анализа **Quantitation/Количественный**, нажать кнопку **Cycling A. Cy5/Cycling A. Red** далее нажать **Show/Показать**

25. Выбрать линейную шкалу графического изображения результатов, нажав кнопку **Linear scale/Линейная шкала** в нижней части окна справа (если эта шкала активна по умолчанию, вместо кнопки **Linear scale/Линейная шкала** видна кнопка **Log scale/Логарифмическая шкала**).

26. В меню основного окна должны быть нажаты кнопки «**Dynamic tube**»/«**Динамич.фон**» и **Slope Correct**«**Коррект. уклона**». Установить **More settings/Outlier Removal** «**Устранение выбросов**» - 15%.

27. В меню «**CT Calculation**»/«**Вычисление CT**» выставить **Threshold/Порог** =0,05. В таблице результатов (окно «**Quant. Results**»/«**Количественные Результаты**») появятся значения **Ct**.

Учет результатов ПЦР-анализа проводится в соответствии с п.8 Инструкции по наличию или отсутствию пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией (что соответствует наличию или отсутствию значения порогового цикла «**Ct**» для исследуемого образца).

Приложение 2. Порядок работы на приборе ДТ-96 (ДНК-технология, Россия).

Подготовка к работе

В случае первого использования прибора **ДТ-96** или переустановки программы необходимо создать протокол с названием **«ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР»**.

- 1. Открыть программу **«RealTime PCR»** для прибора **ДТ-96**.
- 2. В появившемся окне выбрать **«Работа с прибором»**.
- 3. В верхней части окна открыть вкладку **«Тест»** и **«Создать/Редактировать тест»**:
- 4. Нажать на кнопку **«Создать новый тест»** и ввести имя нового теста **«ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР»**. Нажать **«ОК»**.
- 5. В появившемся окне задать следующие параметры:
Тип – качественный
Метод – Пороговый (Ct)
Пробирки – образцы
Объем рабочей смеси в пробирке – 25 мкл
Флуорофоры – Fam; Rox, Hex, Cy5
Создать программу амплификации **«ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР»** нажав на иконку .

6. В редакторе программ амплификации выбрать шаблон  и нажать кнопку **«Применить»**.

7. В появившемся окне в соответствии с инструкцией к прибору задать программу амплификации с параметрами, указанными в таблице 5.

Таблица 5. Температурно-временной режим на ДТ-96

№	Температурно-временной режим	Число циклов
1	95°C – 5 мин	1
2	95°C – 20 сек	45
	58°C – 30 сек детекция FAM, HEX, ROX, Cy5	
	72°C – 30 сек	

Нажать **«ОК»** и сохранить программу под именем **«ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР»**. При дальнейшей работе использовать созданную программу.

- 8. При запуске прибора выбирать **«Работа с прибором»** и **«Добавить тест»**. В окне добавления теста выбрать **«ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР»**.
- 9. В разделе **«1. Образцы»** ввести количество образцов включая все контрольные образцы. В разделе **«3. Контроли»** поставить нули и нажать **«ОК»**.
- 10. Пользуясь инструкцией к прибору заполнить **«Идентификатор пробирки»** и **«Тип»**, обращая внимание на порядок заполнения. Нажать кнопку **«Применить»**.

11. Установить пробирки в реакционный блок согласно порядку заполнения и нажать кнопку **«Запуск программы»**. В появившемся окне набрать название протокола и **«Сохранить»**.

12. После завершения реакции можно сразу приступить к анализу результатов, либо при следующей загрузке нажать **«Просмотр архива»**.

13. Далее нажать на иконку с изображением папки  и выбрать файл, в котором был сохранен протокол. Выбрать тип анализа **«Ct(Cp) для всех каналов»**. Метод – **«Пороговый (Ct)»**.

14. В окне справа отобразятся названия образцов и значения пороговых циклов. Выбрать 10%. В позиции **Критерии достоверности данных** ввести: Нижняя граница/порог положительного результата-5%, верхняя граница/порог нормализации данных -30%. Нажать кнопку **«Применить»**.

15. Для получения сводного отчета по протоколу необходимо нажать кнопку .


В верхней части окна нажать клавишу **«Печать»** или **«Сохранить»**, выбрать расширение файла, например *.rtf MS Word, далее **«Рабочий стол»** ☐ **«ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР»** ☐ **«Отчеты»** ☐ **«Год»** ☐ **«Месяц»**, в поле **«Имя файла»** ввести название в форме **«год. месяц. число-данные»**. Нажать **сохранить**.

Нажать клавишу **«Закрыть»**. Закрыть или свернуть программу **«RealTime PCR»**.

Учет результатов ПЦР-анализа проводится в соответствии с п.8 Инструкции по наличию или отсутствию пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией (что соответствует наличию или отсутствию значения порогового цикла «Ct» для исследуемого образца).

Приложение 3. Порядок работы на приборе CFX96 (Bio-Rad, США)

- 1. Включить прибор и запустить программу **Bio-Rad CFX Manager**.
- 2. В стартовом окне необходимо выбрать **Create a new Run** (или в меню **File** выбрать **New** и далее **Run...**).

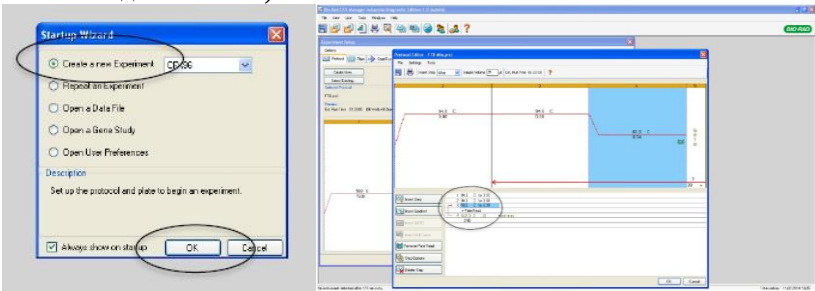


- 3. В окне **Run Setup** выбрать вкладку **Protocol** и нажать кнопку **Create new....** В появившемся окне **Protocol Editor – New** задать параметры амплификации в соответствии параметрами, указанными в таблице 6.

Таблица 6. Температурно-временной режим амплификации на CFX96

№	Температурно-временной режим	Число циклов
1	95°C – 5 мин	1
2	95°C – 20 сек	45
	58°C – 30 сек детекция FAM, HEX, ROX, Cy5	
	72°C – 30 сек	

Задать объем реакционной смеси **Sample Volume – 25 мкл.**

- 4. Задать схему планшета – расположение пробирок и детекцию флуоресцентного сигнала во всех пробирках по используемым каналам в окне **Plate** модуля **Experiment Setup**. В меню **Sample type** выбрать **Unknown**, нажав на кнопку **Select Fluorophores...**, выбрать галочками флуорофоры **FAM, HEX, ROX, Cy5** и нажать **OK**, затем задать галочками измерение флуоресцентного сигнала в выбранных пробирках по данным каналам. В окне **Sample name** задать название образцов. Сохранить схему планшета.

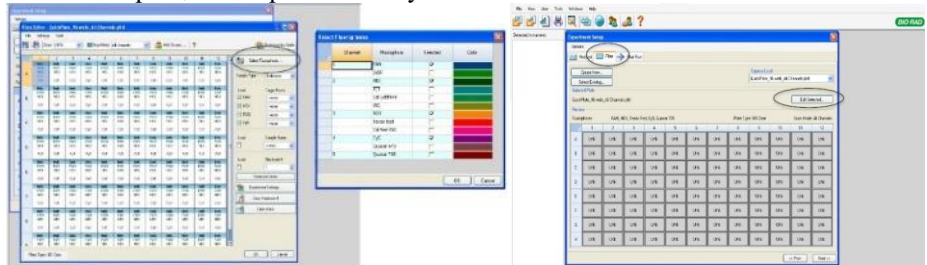


Открыть крышку прибора, нажав кнопку **Open Lid**. Поставить реакционные пробирки в ячейки амплификатора в соответствии с предварительно запрограммированной схемой планшета. Закрыть крышку прибора, нажав кнопку **Close Lid**.

5. Запустить выполнение выбранной программы «ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» с заданной схемой планшета, нажав кнопку **Start Run**.

6. После окончания выполнения программы можно приступить к анализу результатов с помощью программного обеспечения прибора **CFX96**.

Анализ результатов амплификации для канала Cy5 (ctp2-cp4epsps).

7. Выбрать в окне модуля **Data Analysis** во вкладке **Quantitation** данные по каналу **Cy5**, выделив галочкой соответствующий бокс под графиком флуоресценции.

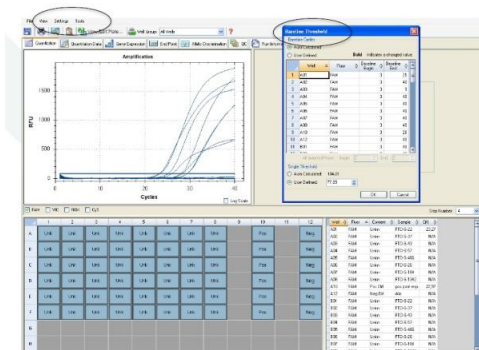

Установить пороговую линию на уровне, соответствующем **10-20 %** от максимального уровня флуоресценции, полученного для образца «К+» в последнем цикле амплификации (уровень флуоресценции считают равным ближайшему к нему делению шкалы, помеченному цифрой). Для этого пороговую линию можно либо перетащить с помощью левой кнопки мыши, либо выбрать в меню **Baseline Threshold** (по щелчку правой кнопки мыши в окне графика флуоресценции) опцию **User Defined** и ввести нужное значение в текстовом поле.

Важно, чтобы график флуоресценции для образца «К+» показывал характерное экспоненциальное нарастание флуоресцентного сигнала.

9. В таблице результатов (окно «**Quantification Data**») появятся значения **Ct**.

Анализ результатов амплификации для канала HEX (pat).

10. Выбрать в окне модуля **Data Analysis** во вкладке **Quantitation** данные по каналу **HEX**, выделив галочкой соответствующий бокс под графиком флуоресценции. Установить пороговую линию на уровне, соответствующем **10-20%** от максимального уровня флуоресценции, полученного для образца «К+» в последнем цикле амплификации (уровень флуоресценции считают равным

ближайшему к нему делению шкалы, помеченному цифрой). Для этого пороговую линию можно либо перетащить с помощью левой кнопки мыши, либо выбрать в меню **Baseline Threshold** (по щелчку правой кнопки мыши в окне графика флуоресценции) опцию **User Defined** и ввести нужное значение в текстовом поле.

Важно, чтобы график флуоресценции для образца «К+» показывал характерное экспоненциальное нарастание флуоресцентного сигнала.

11. В таблице результатов (окно «**Quantification Data**») появятся значения Ct.

Анализ результатов каналов ROX (pSsuAra) и FAM (tE9) выполняют аналогично каналам HEX и Cy5.

12. Учет результатов ПЦР-анализа проводится в соответствии с п.8 Инструкции по наличию или отсутствию пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией, что соответствует наличию или отсутствию значения порогового цикла «Ct» для исследуемого образца.

Приложение 4. Лист вносимых изменений

Редакция	Место вносимых изменений	Суть вносимых изменений
Версия 1.1 от 01.04.2021	Раздел «Приложения» Инструкции	Добавлено Приложение 3 «Порядок работы на приборе CFX96 (Bio-Rad, США)»
Версия 1.2 от 29.09.2022	Приложение 2. Порядок работы на приборе ДТ-96 (ДНК-технология, Россия)	Геометрический (Cp) метод обработки данных заменён на пороговый (Ct)

По вопросам качества набора реагентов «ПЦР-ГМО-СКРИН-2-ФАКТОР» или по вопросам приобретения тест-систем нашего производства просьба обращаться в ООО «ВЕТ ФАКТОР» по адресу:

108840, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д.2

Тел: 8 (499) 271-71-26, добавочный 243

Email: vet@faktor.ru